


SomnoSwiss[®] 
besser schlafen

AVA

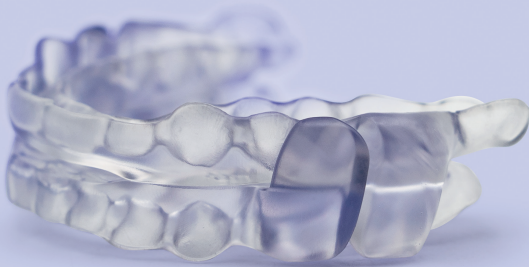

Instructions for use

Herzliche Gratulation zu Ihrer SomnoSwiss® AVA Schlafschiene

Diese professionelle UKPS Schlafschiene wurde von unseren Experten auf Ihre individuelle Zahnsituation angepasst und unter den strengsten Normen für Medizinprodukte hergestellt. In dieser Anleitung finden Sie nützliche Informationen und unsere Empfehlungen für die korrekte Verwendung und Pflege der SomnoSwiss® AVA Schiene.

Diese Therapie hilft Ihnen, durch die bessere Atmung während des Schlafs Ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern.

Ihr SomnoSwiss® Team – besser schlafen



Indikation

SomnoSwiss® AVA ist eine Schiene zur Vorschubbewegung des Unterkiefers, die für Patienten mit leichter bis mittelschwerer oder schwerer obstruktiver Schlafapnoe (OSA) indiziert ist sowie für jene, die andere Behandlungen nicht vertragen. Die Schiene ist auch für Schnarchpatienten und Bruxismuspatienten (Knirschschiene) geeignet.

Kontraindikation:

Die Therapie sollte nicht angewendet werden


- bei zentraler Schlafapnoe (CSA)
- bei schweren Atemstörungen, die nicht mit Schlafapnoe in Zusammenhang stehen
- bei Dysfunktion des Kiefergelenks
- bei lockeren Zähnen
- bei fortgeschrittener Parodontalerkrankung
- im Alter unter 18 Jahren

Bitte beachten:

Bei jedem Zahnarztbesuch oder jeder Zahnreinigung beim Zahnarzt ist die SomnoSwiss® AVA mitzunehmen. Bei einer neuen Zahnversorgung muss die Schiene durch den Zahnarzt geprüft und allenfalls angepasst werden.

1 SomnoSwiss® AVA

Die SomnoSwiss® AVA besteht aus zwei einzelnen Schienen, die gemeinsam den Unterkiefer in einer definierten therapeutischen Lage (Protrusion) halten. Diese vom Zahnarzt definierte Protrusion des Unterkiefers hält die Atemwege offen.

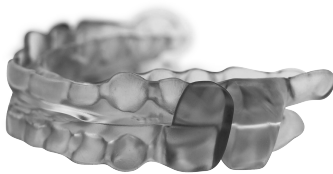

AVA Schlafschiene

2 Einsetzen und entfernen der Schiene

Vor dem Einsetzen in den Mund fügen Sie die Schienen zusammen. Setzen Sie die Schienen in den Mund und steigen Sie zuerst mit dem Oberkiefer ein. Anschliessend schieben Sie den Unterkiefer nach vorne und beißen vorsichtig zusammen, bis beide Schienen auf den Zahnkränzen festsitzen.

Zum Entfernen der Schiene halten Sie mit beiden Fingern die Unterkiefer- oder Oberkieferschiene fest und ziehen diese von den Zähnen. Dieses Vorgehen wiederholen Sie bei der anderen Schiene.

3 Eingewöhnung

Die Eingewöhnungszeit kann bis zu sechs Wochen dauern. Der Tragekomfort auf den Zähnen wird sich nach der Eingewöhnungszeit verbessern. Das Tragen der Schiene kann zu vorübergehenden, aber unbedenklichen Muskelverspannungen («Muskelkater») führen.



Es kann sein, dass am Morgen aufgrund der gedehnten Kaumuskulatur Ihre Zähne nicht wie gewohnt zusammenbeißen. In diesem Fall beißen Sie vorsichtig und wiederholt nach dem Entfernen der Schienen auf den Bite Trainer entlang des gesamten Zahnbogens und besonders auf die Backenzähne. Dies entspannt die Muskulatur, so dass die Zähne wieder wie gewohnt zusammenbeißen.




Ebenfalls können Sie Kiefermuskulübungen zur Lockerung gemäss der Leitlinie der Gesellschaft für zahnärztliche Schlafmedizin auf unserer Internetseite finden.

4 Einstellphase (Titrationsphase)

In der Titrationsphase wird eine Nachjustierung des Unterkiefers durch den behandelnden Arzt geprüft und, wenn nötig, Anpassungen vorgenommen. Der Behandler wird die weiteren Unterkiefer-Zusatzschienen bei SomnoSwiss® bestellen. Innerhalb des ersten Jahres sind bis zu fünf Unterkiefer-Zusatzschienen im Preis inbegriffen.



-

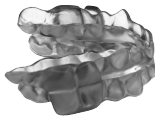

Startschienen



+



++

Start und Unterkiefer-Zusatzschienen

5 Reinigungshinweise und Pflege



SomnoSwiss® empfiehlt die Schiene täglich vor und nach jedem Tragen zu reinigen. Speichel und Rückstände auf der Schiene müssen unmittelbar nach dem Herausnehmen mit kaltem Wasser, etwas Spülmittel und mit einem weichen Borstenpinsel gereinigt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Schiene völlig trocken ist, bevor Sie sie in der Schale lagern. Nur so können Sie Bakterienbildung vorbeugen.

Nach Bedarf können schonende, freiverkäufliche dentale Reinigungsmittel verwendet werden.



Wir empfehlen zur Pflege der Schienen die antibakteriell wirkende CINNA Care Solution mit natürlichen Inhaltsstoffen von Bussmann Orthodontie-Labor AG.


Reinigung CINNA Care Solution

1.



Ein Glas mit Wasser befüllen, so dass die Schienen gedeckt sind.

2.

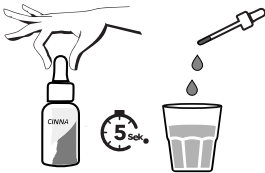

Pipette drücken, loslassen, 5 Sekunden warten, bis die Lösung nach oben steigt. Pipette ins Wasser entleeren und verrühren. Mischverhältnis: 1x Pipette (ca. 2ml) : 50 ml Wasser

3.



Zahnapparat für 30 Minuten in die CINNA Lösung zur Reinigung und Pflege der Schiene legen.

Es wird empfohlen, den Vorgang 1-2 Mal pro Woche zu wiederholen.

Wichtige Hinweise



Die Schienen dürfen NIE LÄNGER als 30 Minuten in einer Reinigungsflüssigkeit oder auch im Wasser liegen bleiben. Andernfalls können irreparable Schäden an der Schiene entstehen.

Die Schienen dürfen nicht der Sonneneinstrahlung und Wärme ausgesetzt werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall heisses Wasser zur Reinigung der Schiene.

Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel mit Schleifkörpern (z. B. Zahnpasta), da dies die Lebensdauer Ihrer Schiene beeinträchtigen könnte.

Amalgamfüllungen können dunkle Verfärbungen auf der Schiene erzeugen.

6 Vorsichtsmassnahmen und Warnhinweise

Die Verwendung der AVA Schiene kann in seltenen Fällen Nebenwirkungen verursachen, welche nach den ersten Wochen der Behandlung oder erst nach dem Absetzen der Therapie verschwinden. Wenn die Nebenwirkungen anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Behandler.

Der Behandler sollte die Vorgeschichte des Patienten einschliesslich Asthma, Atmungsstörungen oder Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme berücksichtigen und den Patienten bei Bedarf an einen entsprechenden Facharzt überweisen, bevor die Schienentherapie begonnen wird.

Warnhinweise

Temporäre Schmerzen in den Kiefermuskeln und im Kiefergelenk

Behinderung der Mundatmung durch die Schiene

Empfindlichkeit an Zähnen und Zahnfleisch

Erhöhter Speichelfluss oder Mundtrockenheit

Muskulär bedingte Bissveränderungen, die nach der Anwendung des Bite Trainers verschwinden

7 Garantie

Bussmann Orthodontie-Labor AG garantiert, dass die SomnoSwiss® AVA Schiene ab dem Datum der Auslieferung an den Zahnarzt frei von Defekten ist. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre. SomnoSwiss® übernimmt keine Garantie für die Wirksamkeit der AVA Schiene bei der Behandlung von Schnarchen und Schlafapnoe.

Félicitations pour votre gouttière de sommeil SomnoSwiss® AVA

Cette gouttière de sommeil professionnelle (OAM) a été adaptée par nos experts à votre situation dentaire individuelle et fabriquée selon les normes les plus strictes pour les dispositifs médicaux. Dans ce manuel, vous trouverez des informations utiles et nos recommandations pour une utilisation et un entretien corrects de la gouttière SomnoSwiss® AVA.

Ce traitement vous aidera à améliorer votre santé générale grâce à une meilleure respiration pendant le sommeil.

Votre équipe SomnoSwiss® - mieux dormir



Indication

SomnoSwiss® AVA est une gouttière d'avancement mandibulaire indiquée pour les patients souffrants d'apnée obstructive du sommeil (AOS) légère à modérée ou sévère, ainsi que pour ceux qui ne supportent pas les autres traitements. La gouttière est également indiquée pour les patients souffrants de ronflement et de bruxisme.

Contre-indication:

le traitement ne doit pas être utilisé


- en cas d'apnée centrale du sommeil (ASC)
- en cas de troubles respiratoires graves qui ne sont pas liés à l'apnée du sommeil
- en cas de dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire
- en cas de dents déchaussées
- en cas de maladie parodontale avancée
- en dessous de 18 ans

A noter :

Lors de chaque visite chez le dentiste ou de chaque nettoyage des dents chez le dentiste, il faut prendre la SomnoSwiss® AVA. En cas de nouvelle restauration dentaire, la gouttière doit être contrôlée et éventuellement adaptée par le dentiste.

1 SomnoSwiss® AVA

La SomnoSwiss® AVA se compose de deux gouttières individuelles qui maintiennent ensemble la mâchoire inférieure dans une position thérapeutique définie (protrusion). Cette protrusion de la mâchoire inférieure, définie par le dentiste, tient les voies respiratoires ouvertes.

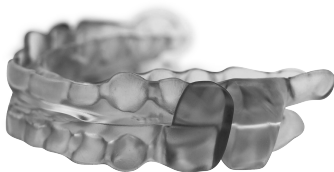

Orthèse d'avancée mandibulaire AVA

2 Mise en place et retrait de la gouttière

Avant de les mettre en bouche, assemblez les gouttières. Placez les gouttières dans la bouche et insérez d'abord la mâchoire supérieure. Ensuite, poussez la mâchoire inférieure vers l'avant et mordez doucement ensemble jusqu'à ce que les deux gouttières soient bien fixées sur les couronnes dentaires.

Pour retirer la gouttière, tenez la gouttière de la mâchoire inférieure ou supérieure avec les deux doigts et retirez-la des dents. Répétez cette procédure pour l'autre gouttière.

3 Acclimatation

La période d'adaptation peut durer jusqu'à six semaines. Le confort de port sur les dents s'améliorera après la période d'accoutumance. Le port de la gouttière peut entraîner des tensions musculaires temporaires («courbatures»), mais sans danger.



Il se peut que le matin, vos dents ne serrent pas comme d'habitude en raison de l'étirement des muscles masticateurs. Dans ce cas, mordez prudemment et à plusieurs reprises sur le Bite Trainer après avoir retiré les gouttières, tout le long de l'arcade dentaire et en particulier sur les molaires. Cela détend la musculature et les dents se serrent à nouveau comme d'habitude.



Vous pouvez également trouver des exercices d'assouplissement des muscles de la mâchoire sur notre site Internet, conformément aux directives de la Société de médecine dentaire du sommeil.

4 Phase de réglage (phase de titration)




Pendant la phase de titration, le médecin traitant vérifie un réajustement de la mâchoire inférieure et procède, si nécessaire, à des adaptations.

Le praticien commandera les autres gouttières supplémentaires pour la mâchoire inférieure chez SomnoSwiss®. Au cours de la première année, jusqu'à cinq gouttières supplémentaires pour la mâchoire inférieure sont comprises dans le prix.



-

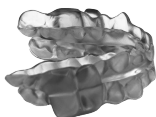

Gouttières début



+



++

Set début et gouttières supplémentaires pour la mâchoire inférieure

5 Conseils de nettoyage et soin



SomnoSwiss® recommande de nettoyer la gouttière tous les jours avant et après chaque utilisation. La salive et les résidus sur la gouttière doivent être nettoyés immédiatement après le retrait avec de l'eau froide, un peu de liquide vaisselle et un pinceau à poils doux.

Assurez-vous que votre gouttière est parfaitement sèche avant de la ranger dans le plateau. C'est la seule façon de prévenir la formation des bactéries.

Si nécessaire, vous pouvez utiliser des produits de nettoyage dentaires doux en vente libre.



Pour l'entretien des gouttières, nous recommandons la CINNA Care Solution antibactérienne à base d'ingrédients naturels de Bussmann Orthodontie-Labor AG.

Nettoyage avec CINNA Care Solution

1.



Remplir un verre d'eau de manière à de sorte que les gouttières soient couverts.

2.



Appuyer sur la pipette, la relâcher, attendre 5 secondes que la solution remonte vers le haut. Vider la pipette dans l'eau et mélanger. Proportion du mélange: 1x pipette (env. 2ml) : 50 ml d'eau

3.



Placer l'appareil dentaire pendant 30 minutes dans la solution CINNA pour le nettoyer et soigner.

Il est recommandé de répéter l'opération 1 à 2 fois par semaine.

Remarques importantes



Les gouttières ne doivent JAMAIS être laissées plus de 30 minutes dans un liquide de nettoyage ou dans l'eau. Cela peut provoquer des dommages irréparables sur les gouttières.

Les gouttières ne doivent pas être exposées aux rayons de soleil ou à la chaleur.

N'utilisez en aucun cas de l'eau chaude pour nettoyer les gouttières.

N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant des abrasifs (par exemple du dentifrice), car cela pourrait nuire à la durée de vie de votre gouttière.

Les obturations en amalgame peuvent provoquer des décolorations sombres sur la gouttière.

6 Précautions et avertissements

L'utilisation de l'orthèse AVA peut, dans de rares cas, provoquer des effets secondaires qui disparaissent après les premières semaines de traitement ou seulement après l'arrêt du traitement. Si les effets secondaires persistent, veuillez consulter votre praticien.

Le praticien doit tenir compte des antécédents du patient, y compris l'asthme, les troubles respiratoires ou les maladies des voies respiratoires et d'autres problèmes de santé et, si nécessaire, adresser le patient à un spécialiste avant de commencer le traitement par l'orthèse.

Avertissements

Douleurs temporaires dans les muscles de la mâchoire et dans l'articulation maxillaire

Obstruction de la respiration buccale par la gouttière

Sensibilité des dents et des gencives

Augmentation de la salivation ou sécheresse de la bouche

Modifications de la morsure d'origine musculaire qui disparaissent après l'utilisation du Bite Trainer

7 Garantie

Bussmann Orthodontie-Labor AG garantit que la gouttière SomnoSwiss® AVA est exempte de défauts à partir de la date de livraison au dentiste. La durée de la garantie est de 2 ans. SomnoSwiss® ne garantit pas l'efficacité de la gouttière AVA dans le traitement du ronflement et de l'apnée du sommeil.

Congratulazioni per il vostro bite da sonno SomnoSwiss® AVA

Questo apparecchio professionale per il sonno UKPS è stato personalizzato dai nostri esperti in base alla vostra situazione dentale individuale e prodotto in conformità con i più severi standard per i dispositivi medici. In queste istruzioni troverete informazioni utili e le nostre raccomandazioni per il corretto utilizzo e la cura del bite SomnoSwiss® AVA.

Questa terapia aiuta a migliorare la salute generale grazie a una migliore respirazione durante il sonno.

Il vostro team SomnoSwiss® - dormire meglio



Indicazioni

SomnoSwiss® AVA è un apparecchio per l'avanzamento mandibolare indicato per i pazienti con apnea ostruttiva del sonno (OSA) da lieve a moderata o grave e per coloro che non tollerano altri trattamenti. L'apparecchio è adatto anche ai pazienti che russano e a quelli che soffrono di bruxismo (apparecchio per il digrignamento).

Controindicazioni:

la terapia non deve essere usata


- in caso di apnea centrale del sonno (CSA)
- gravi disturbi respiratori non correlati all'apnea notturna
- disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare
- denti allentati
- malattia parodontale avanzata
- età inferiore ai 18 anni

Nota bene:

SomnoSwiss® AVA deve essere portato con sé ogni volta che si va dal dentista o si fa la pulizia dei denti. Il bite deve essere controllato dal dentista e regolato, se necessario, quando vengono inseriti nuovi denti.

1 SomnoSwiss® AVA

SomnoSwiss® AVA consiste in due bite individuali che insieme mantengono la mascella inferiore in una posizione terapeutica definita (protrusione). Questa protrusione della mascella inferiore, definita dal dentista, mantiene aperte le vie aeree.

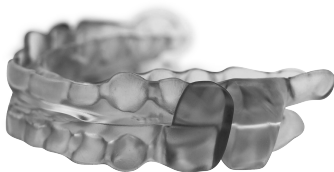

Bite per il sonno AVA

2 Inserimento e rimozione del bite

Unire i bite prima di inserirli in bocca. Posizionare i bite in bocca e inserire prima la mascella superiore. Quindi spingere in avanti la mascella inferiore e mordere con cautela fino a quando entrambi i bite sono saldamente posizionati sulle arcate dentali.

Per rimuovere il bite, tenere il bite inferiore o superiore con entrambe le dita e tirarlo via dai denti. Ripetere la procedura per l'altro bite.

3 Familiarizzazione



Il periodo di familiarizzazione può durare fino a sei settimane. Il comfort dell'uso sui denti migliorerà dopo il periodo di familiarizzazione. L'uso del bite può provocare una tensione muscolare temporanea ma innocua («muscoli doloranti»).

È possibile che al mattino i denti non si mordano come al solito a causa della tensione dei muscoli masticatori. In questo caso, dopo aver rimosso i bite, mordete con attenzione e ripetutamente il Bite Trainer lungo l'intera arcata dentale e soprattutto sui molari. In questo modo si rilassano i muscoli e i denti tornano a mordere insieme come di consueto.



Sul nostro sito web sono disponibili anche esercizi di rilassamento dei muscoli mascellari secondo le linee guida della Society for Dental Sleep Medicine.

4 Fase di regolazione (fase di titolazione)




Durante la fase di titolazione, l'odontoiatra curante controlla la mascella inferiore per verificare la regolazione e, se necessario, effettua gli aggiustamenti.

Il dentista ordinerà i bites mandibolari aggiuntivi a SomnoSwiss®. Nel prezzo sono inclusi fino a cinque bites mandibolari aggiuntivi entro il primo anno.



-

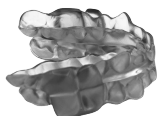

Bite iniziale



+



++

Bite iniziale e bites mandibolari aggiuntive

5 Istruzioni per la pulizia e la cura



SomnoSwiss® raccomanda di pulire il bite quotidianamente prima e dopo ogni utilizzo. La saliva e i residui sulla stecca devono essere puliti immediatamente dopo la rimozione con acqua fredda, un po' di detergente e una spazzola a setole morbide.

Assicurarsi che la stecca sia completamente asciutta prima di riporla nel vassoio. Questo è l'unico modo per evitare la formazione di batteri.

Se necessario, è possibile utilizzare deter-genti dentali delicati disponibili in commercio.



Per la cura dei bite consigliamo la soluzione antibatterica CINNA Care Solution con ingredienti naturali del Laboratorio Bussmann.

Pulizia con CINNA Care Solution

1.



Riempire un bicchiere d'acqua in modo da coprire il bite.

2.



Premere e rilasciare la pipetta e attendere 5 secondi che la soluzione salga verso l'alto. Svuotare la pipetta in acqua e mescolare. Relazione di dosaggio: 1x pipetta (circa 2ml) : 50 ml di acqua

3.



Posizionare l'apparecchio dentale per 30 minuti nella soluzione CINNA per pulirlo e curarlo.

Si consiglia di ripetere l'operazione 1 a 2 volte alla settimana.

Note importanti



I bite non devono MAI essere lasciati in un liquido detergente o in acqua per più di 30 minuti. Ciò può causare danni irreparabili.

I bite non devono essere esposti alla luce del sole o al calore.

Non utilizzare mai acqua calda per pulire il bite.

NON utilizzare detergenti con particelle abrasive (ad es. dentifricio), poiché potrebbero compromettere la durata del bite.

Le otturazioni in amalgama possono causare una colorazione scura del bite.

6 Precauzioni e avvertenze

In rari casi, l'uso del bite AVA può causare effetti collaterali, che possono scomparire dopo le prime settimane di trattamento o solo dopo l'interruzione della terapia. Se gli effetti collaterali persistono, contattare il medico curante.

Il medico deve considerare l'anamnesi del paziente, compresi asma, disturbi respiratori o malattie respiratorie e altri problemi di salute e, se necessario, indirizzare il paziente a uno specialista appropriato prima di iniziare la terapia con il bite.

Avvertenze

Dolore temporaneo ai muscoli della mandibola e all'articolazione temporo-mandibolare

Ostruzione della respirazione con la bocca a causa del bite

Sensibilità di denti e gengive

Aumento della salivazione o secchezza delle fauci

Cambiamenti muscolari del morso che scompaiono dopo l'uso del Bite Trainer

7 Garanzia

Bussmann Orthodontie-Labor AG garantisce che il bite SomnoSwiss® AVA è privo di difetti dalla data di consegna al dentista. Il periodo di garanzia è di 2 anni. SomnoSwiss® non garantisce l'efficacia del bite AVA nel trattamento del russamento e dell'apnea notturna.

Congratulations on your SomnoSwiss® AVA Sleep Appliance

This professional sleep appliance is customized to your individual dental situation by our experts and manufactured under the highest standards for medical devices. In this guide, you will find useful information and our recommendations for the correct use and care of the SomnoSwiss® AVA.

This therapy helps to improve your general health through better breathing during sleep.

your SomnoSwiss® Team - sleeping better



Indication

SomnoSwiss® AVA is a mandibular advancement appliance intended for patients with obstructive sleep apnea (OSA) in a wide range of severity, and those for whom alternative treatments are inadequate. The splint is also suitable for snoring patients and bruxism patients.

Contraindication:

The therapy should not be used


- for central sleep apnea (CSA)
- for severe breathing disorders that are not directly related to sleep apnea
- for dysfunction of the temporomandibular joint
- for loose teeth
- for advanced periodontal disease
- under the age of 18

Please note:

You must bring your SomnoSwiss® AVA to your dental appointments every time. The splint must be checked by the dentist and adjusted, if necessary, when new teeth are fitted.

1 SomnoSwiss® AVA

SomnoSwiss® AVA consists of two individual splints that together hold the lower jaw in a defined therapeutic position (protrusion). This protrusion of the lower jaw, defined by the dentist, keeps the airways open.

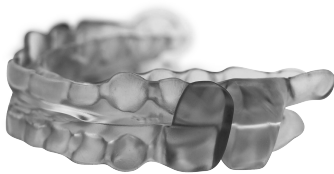

AVA sleeping bite

2 Inserting and removing the splint

Before inserting the splint into the mouth, join the splints together. Place the splints in the mouth and insert the upper jaw first. Then push the lower jaw forward and bite together carefully until both splints are firmly seated on the dental arches.

To remove the splint, hold the lower or upper jaw splint firmly with both fingers and pull it off the teeth. Repeat this procedure for the other splint.

3 Acclimation Phase



The acclimation period may take up to six weeks. Wearing-comfort will improve after the familiarization period. Wearing the splint may lead to temporary but harmless muscle tension (“sore muscles”).

In the morning, your teeth may not bite together as usual due to the stretched chewing muscles. In this case, bite carefully and repeatedly on the Bite Trainer along the entire dental arch, and especially on the molars after removing the splints. This relaxes the muscles so that the teeth can bite together again as usual.




You can also perform jaw muscle training to relax the jaw muscles in accordance with the Society for Dental Sleep Medicine’s guidelines found on our website.

4 Adjustment Phase (Titration Phase)



The lower jaw is checked by the dentist during the titration phase, and, if necessary, adjustments are made.

The practitioner can order additional splints from SomnoSwiss®. Within the first year, up to five additional mandibular splints are included in the price.

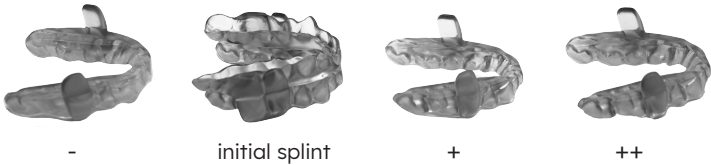

initial splint and additional mandibular splints

5 Cleaning instructions and care



SomnoSwiss® recommends cleaning the splint daily before and after wearing the SomnoSwiss AVA. Saliva and residues on the splint must be cleaned immediately after removal with cold water, a little detergent, and a soft bristle brush.


Make sure that your splint is completely dry before storing it in the tray. This is the only way to prevent the formation of bacteria.


Non-invasive dental cleaning agents can be used if necessary..




We recommend using the antibacterial CINNA Care Solution with natural ingredients from Bussmann Orthodontie-Labor AG.

CINNA Care Solution cleaning

1.  Fill a glass with water so tha the splints are covered.

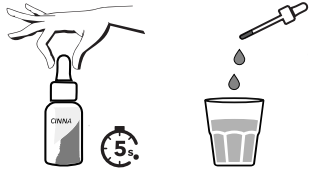2.  Press and release the pipette, wait 5 seconds until the solution rises to the top. Empty the pipette into the water and stir. Mixing ratio: 1x pipette (approx. 2ml) : 50 ml water

3.  Immerse the appliance for 30 minutes in the CINNA solution for cleaning and care of the splint.

It is recommended to repeat the procedure 1-2 times a week.

Important notes



The splints must NEVER be left in a cleaning fluid or water for longer than 30 minutes. Even in water, irreversible damage can be caused to the splint.

The splints must not be exposed to sunlight and heat.

Never use hot water to clean the appliance.

Do NOT use cleaning agents with abrasive particles (e.g. toothpaste), as this could affect the life of your splint.

Amalgam fillings may also cause dark discoloration on the splint.

6 Precautions and warnings

The use of the AVA splint may cause side effects in rare cases, which may disappear after the first few weeks of treatment or only after discontinuation of therapy. In the event these side effects persist, please contact your practitioner, who should consider the patient's medical conditions (including asthma, respiratory disorders or diseases, and other outstanding health issues) and, if necessary, refer the patient to a specialist before starting splint therapy.

Warnings

Temporary pain in the jaw muscles and temporomandibular joint

Impaired mouth breathing due to the splint


Sensitivity of teeth and gums

Increased salivation or dry mouth

Muscular bite changes that disappear after using the Bite Trainer

7 Warranty

Bussmann Orthodontie-Labor AG guarantees that the SomnoSwiss® AVA splint is free of defects from the date of delivery to the dentist. The guarantee period is 2 years. SomnoSwiss® does not guarantee the effectiveness of the AVA splint in the treatment of snoring and sleep apnea.

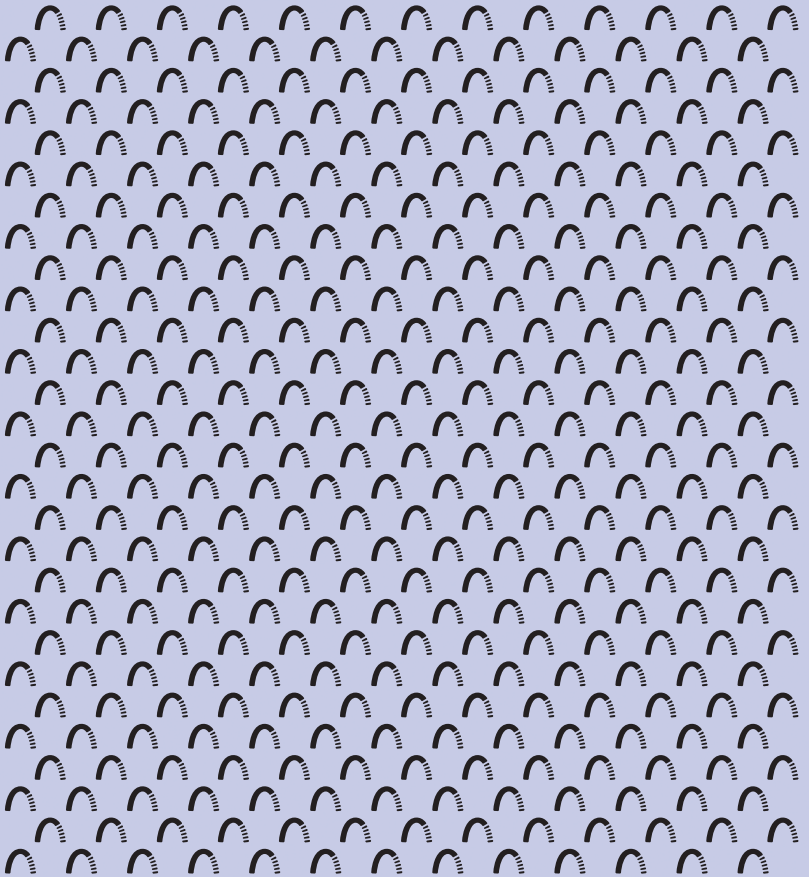

Bussmann Orthodontie-Labor AG
Frankenstrasse 7a
6003 Luzern
T 041 210 00 03
info@obu.ch

Weitere Informationen für
Patienten und Zahnärzte:



www.somno.swiss